

搬送用資器材

# ADJUSTretcher®

アジャストレッチャー



多くの救急救助隊員の方のご意見を参考にして開発された  
ストレッチャーの長さを調整できる新しいストレッチャーです。

- ✓ ストレッチャーの長さを調整でき身長差に応じた搬送が可能
- ✓ 脚部グリップをまとめることができる「おまとめグリップ」が付属
- ✓ 人間工学的知見に基づいた力の入れやすい持ち手配置（頭部・脚部）
- ✓ 搬送後、そのままストレッチャーに乗せ搬送可能
- ✓ 内蔵マットが傷病者の負担を軽減

## アジャストレッチャー

### 可変式フットカバー

ストレッチャー自体の長さを調整することが可能で、脚部安定ならびに身長差に応じた搬送が可能です。また広げること、洗浄時の作業性向上も期待できます。



### おまとめグリップ

(脚部グリップ結束ベルクロバンド)  
脚部グリップをまとめることができるバンドが付属しており、下り搬送時の旋回性やコントロール性を向上させることが可能です。



### 8 個の持ち手+4 個のハンドベルト

<通常 8 か所, スライド用 2 か所, サブ (ショルダーベルト※オプション用) 2 か所>  
多めの持ち手を設けることで、搬送状況に応じた負荷の少ない姿勢取りが可能です。




### 搬送準備時の傷病者負担を軽減

持ち手はしっかり握れる太さを保持しながらも芯材には柔軟素材を採用し、ストレッチャーへ移乗の際傷病者の下敷きになった場合でも負担を軽減するよう配慮されています。



### 力の入れやすい配置

人間工学的知見に基づき、頭部ならびに脚部の持ち手をわずかに傾斜させることで、自然な手首角度を保持することができるようになり、力を入れやすく安定感が得られます。

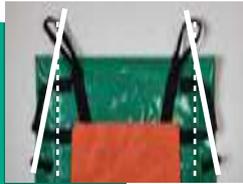

### スライド搬送も可能

少し長い垂直用の持ち手 2 箇所、ならびに背面保護布が滑走性を向上させることで、狭い階段での下り搬送時にはスライド搬送も可能です。



### ● ADJ-001 アジャストレッチャー



|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ   | 使用時 約60 (幅) ×190/210/240 (長さ) ×2.0 (厚さ) cm<br>収納時 約60 (幅) ×60 (長さ) ×10 (厚さ) cm <三つ折り> |
| 重さ    | 約2.9kg                                                                                |
| 耐荷重   | 140kg                                                                                 |
| 材質    | 本体: ターポリン生地 底面保護布: ポリエステル<br>クッション材: ウレタンマット<br>グリップ: ビニールチューブ黒ベルト巻 (6箇所付)            |
| 特長    | 可変式フットカバー                                                                             |
| オプション | 可動式安全ベルト、ショルダーベルト (カラビナ付)、収納袋                                                         |

### アジャストレッチャー

ADJ-001 72,000 円 (税込 79,200 円)

### 交換部品



保護布 (ポリエステル)  
CYF-OP1 11,000 円  
(税込 12,100 円)

### オプション品



可動式安全ベルト (170cm)  
CYF-170 7,500 円  
(税込 8,250 円)



ショルダーベルト (カラビナ付)  
PSS-OPS 13,000 円  
(税込 14,300 円)



収納袋  
ADJ-OP1 6,000 円  
(税込 6,600 円)

●製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。  
●カタログ掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。  
●掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。



## エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F  
TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385  
営業拠点: 長野、関東、東海、関西、九州  
ホームページ: www.airstretcher.jp  
E-mail: info.us@airstretcher.jp